




- قلم را برای هواگیری آماده می کنیم: درجه را روی عدد ۲ بچرخانید قلم را بصورت عمود نگهدارید و دکمه تزریق را فشار دهید تا یک قطره در نوک سوزن انسولین ببینید. اگر آن را ندیدید این روند را تادیدن قطره تکرار کنید.



- A چسب روی سر سوزن را جدا کنید
- B سر سوزن را عمودی وارد قسمت پلاستیکی انتهایی قلم کرده بچرخانید تا زمانی که دیگر نچرخد.
- C درپوش بیرونی سوزن را بردارید
- D درپوش داخلی سوزن را بکشید

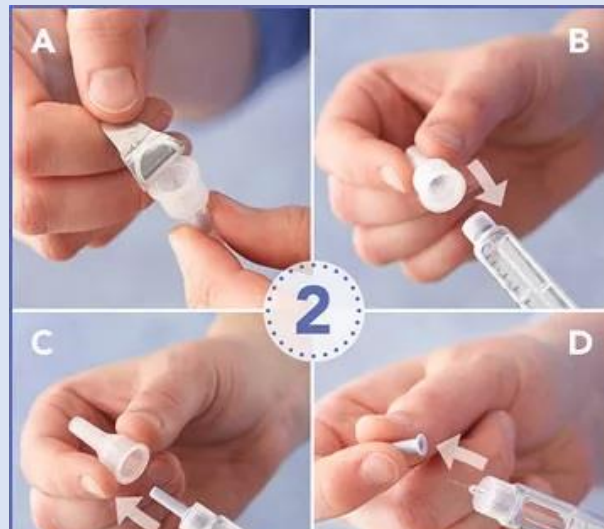


- ابتدا دستان خود را با آب و صابون بشویید
- درپوش قلم را بردارید



- بعد از گذاشتن درپوش روی سوزن ، سر سوزن را در جهت مخالف بچرخانید و سر سوزن را جدا کرده دور بیندازید.



- قلم انسولین را در مشت نگه دارید و انگشت شست را روی دکمه تزریق بگذارید. کل سوزن را عمودی داخل پوست فرو کنید. دکمه را محکم فشار دهید و تا ۱۰ بشمارید سپس سوزن را بیرون بکشید.

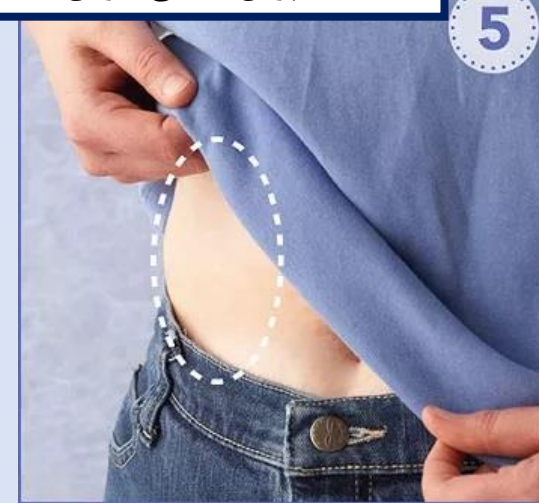

- محل تزریق را با پد الکلی تمیز کنید



- دوز مورد نظر خود را روی واحد مربوطه بچرخانید